


生产 GPS 安装及绑定操作指南

1. 业务操作流程

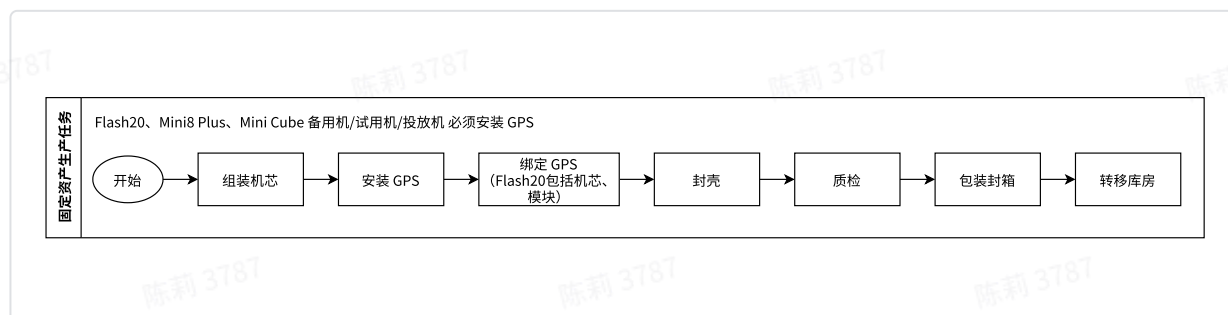

2. 安装 GPS 操作说明

2.1 仪器范围说明

- 资产类型：卡尤迪固定资产
- 仪器类型：Flash 20、Mini8 Plus、Mini 8 Cube
- 存货类型：备用机、试用机、投放机

2.2 GPS 设备使用说明

使用 GPS 无线设备之前，需要打开设备上盖，打开开关才能上线定位。开关开到 ON 就是开机，OFF 是关机，无线设备默认是关机状态，安装之前请打开开关，打开之后红蓝灯交替闪烁，上位机 5 分钟左右完成定位以后，灯光熄灭，即可正常使用。



2.3 Flash 20 安装 GPS 操作说明

设备包含 2 种物料：GPS 定位器、2 张 3M 胶带魔术贴



安装步骤：

1. 将 1 张 3M 胶带魔术贴固定贴在 GPS 指示灯侧，如下图 1
2. 将另 1 张 3M 胶带魔术贴固定贴在仪器排风口内侧（靠下面），如下图 2
3. 将 GPS 贴好 3M 胶带魔术贴侧贴在仪器排风口魔术贴处，如下图 3



图1

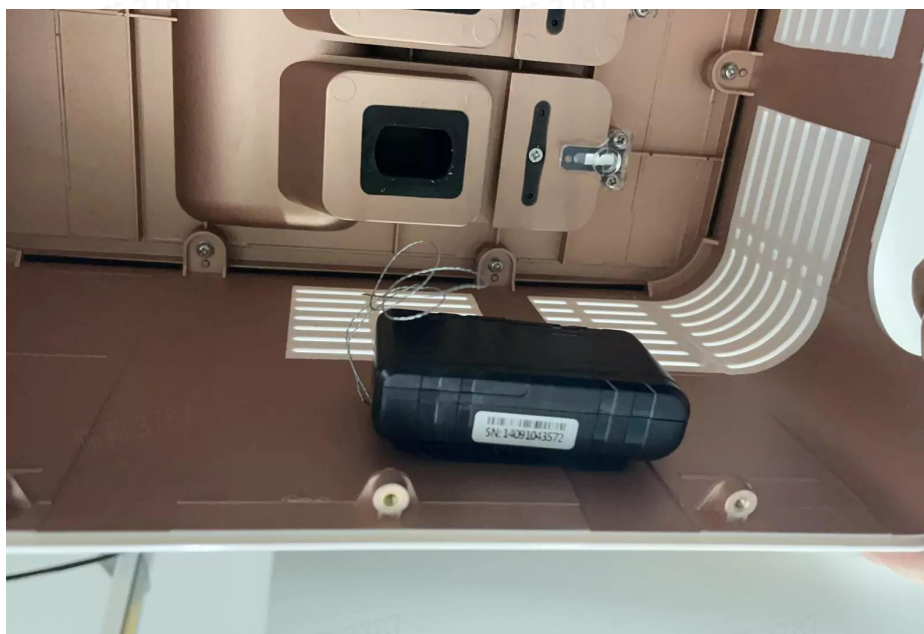


图3

图2缺失

2.4 Mini 8 (Plus&Cube) 安装 GPS 操作说明

设备包含3种物料：GPS 定位器、铅封头、2 张 3M 胶带魔术贴



安装步骤：

1. 将不锈钢线穿入仪器设备通风口内，两个线头插入铅封头的孔内，如下图1；
2. 按下铅封头的按键，如下图2；
3. 将 1 张 3M 胶带魔术贴固定贴在 GPS 指示灯侧，如下图 3；
4. 将另 1 张 3M 胶带魔术贴固定贴在仪器背面右侧，如下图 4；
5. 将 GPS 固定在仪器上面，如下图 5
6. 设备需要装箱时，将 GPS 从魔术贴上拆下，放在设备上方即可，不会干扰安装箱的空间。



图1

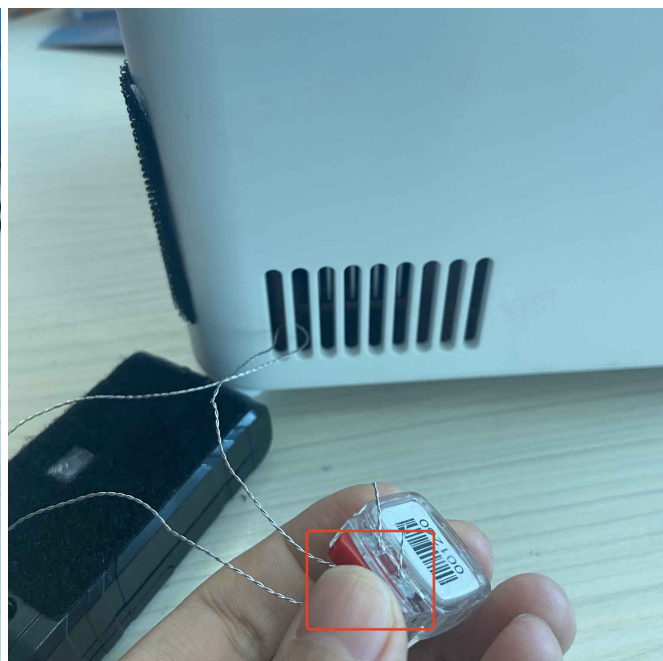


图2



图3

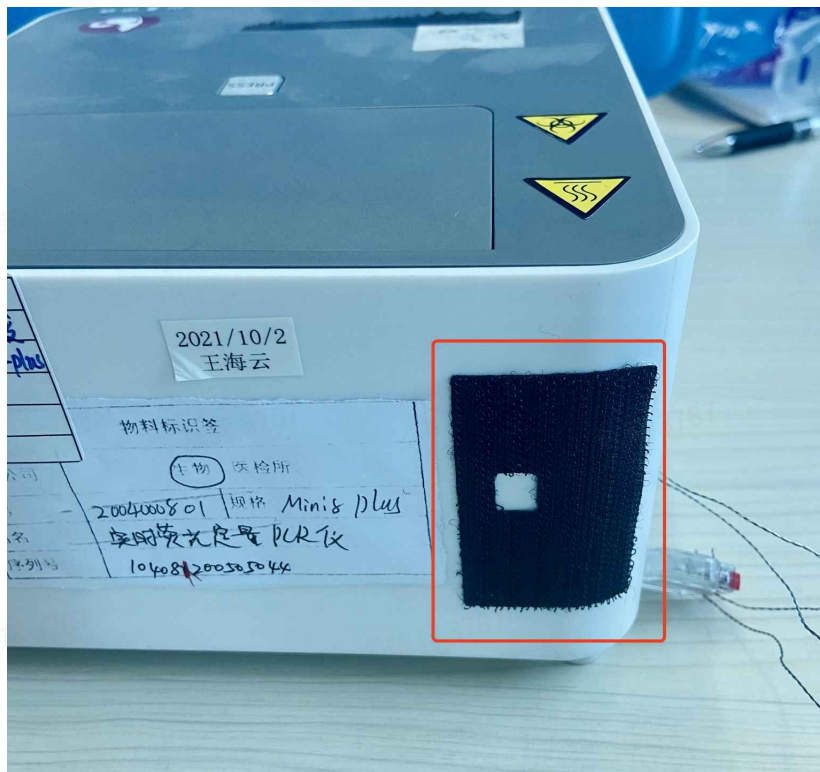


图4



图5

3. 软件绑定 GPS 操作说明

3.1 登录

- **账号说明:** 账号由技术创建, 需提供手机号、姓名、职责(生产)、所属生产线(比如上地508、上地509、宜兴、亦庄);
- **操作指南入口:** 支持随时查看 GPS 安装和绑定操作流程;
- **操作流程:** 扫描二维码 ➡ 手机号、验证码登录 ➡ 进入首页;



仓库仪器管理系统

请输入手机号码

[获取验证码](#)

请输入验证码

登录

Sketch 9:41 AM 100%

×

仪器管理

Q 请输入仪器序列号

[查看安装&绑定 GPS 操作指南](#)

1045 6201 2110 19	2022-03-15 11:00
仪器类型: Flash 20	
GPS: 1234556677	
1045 6201 2110 09	2022-03-15 10:00
仪器类型: Mini8 Plus	
GPS: 1234556678	
1045 6201 2110 10	2022-03-15 09:00
仪器类型: Mini8 Cube	
GPS: 1234556670	

绑定 GPS

3.2 绑定 GPS 流程

1. 操作流程: 点击“绑定 GPS”按钮 → 填写内容 (**Flash20 机芯模块为必填**, 编号支持自动识别) → 填写完成, 点击“确认绑定” → 绑定成功 → 继续绑定或者退出绑定

Sketch 9:41 AM 100%

×

仪器管理

Q 请输入仪器序列号

[查看安装&绑定 GPS 操作指南](#)

1045 6201 2110 19	2022-03-15 11:00
仪器类型: Flash 20	
GPS: 1234556677	
1045 6201 2110 09	2022-03-15 10:00
仪器类型: Mini8 Plus	
GPS: 1234556678	
1045 6201 2110 10	2022-03-15 09:00
仪器类型: Mini8 Cube	
GPS: 1234556670	

绑定 GPS

Sketch 9:41 AM 100%

×

绑定仪器 GPS

仪器信息

请选择仪器类型

请填写/扫描仪器SN号

GPS信息

请填写/扫描GPS编号

机芯编号（选填）

请填写/扫描机芯编号

模块信息（选填）

模块1编号

模块2编号

模块3编号

模块4编号

图片记录

仪器序列号

机芯

模块1

模块2

模块3

模块4

保存

确认绑定

2. 保存功能说明：该功能指“暂时保存”，支持未一次性完成绑定，可待下次进入继续绑定

3. 其他说明

- 一旦绑定成功后不允许修改
- Flash 20 绑定模块编号时，不允许拆开模块，建议手动填写模块编号，避免影响其使用寿命

4. 注意事项

4.1 图文识别拍照要求

- 像素要求：最小100*100 像素、最大4096 *4096 像素
- 高质量图片符合条件如下：

- 图片清晰完整
- 无虚焦
- 抖动模糊
- 反光感染
- 识别主体尽量摆正，不要过于密集

4.2 仪器序列号拍照示例

